


# Objektträger-Glas-Eindeckautomat


## RCM 9000

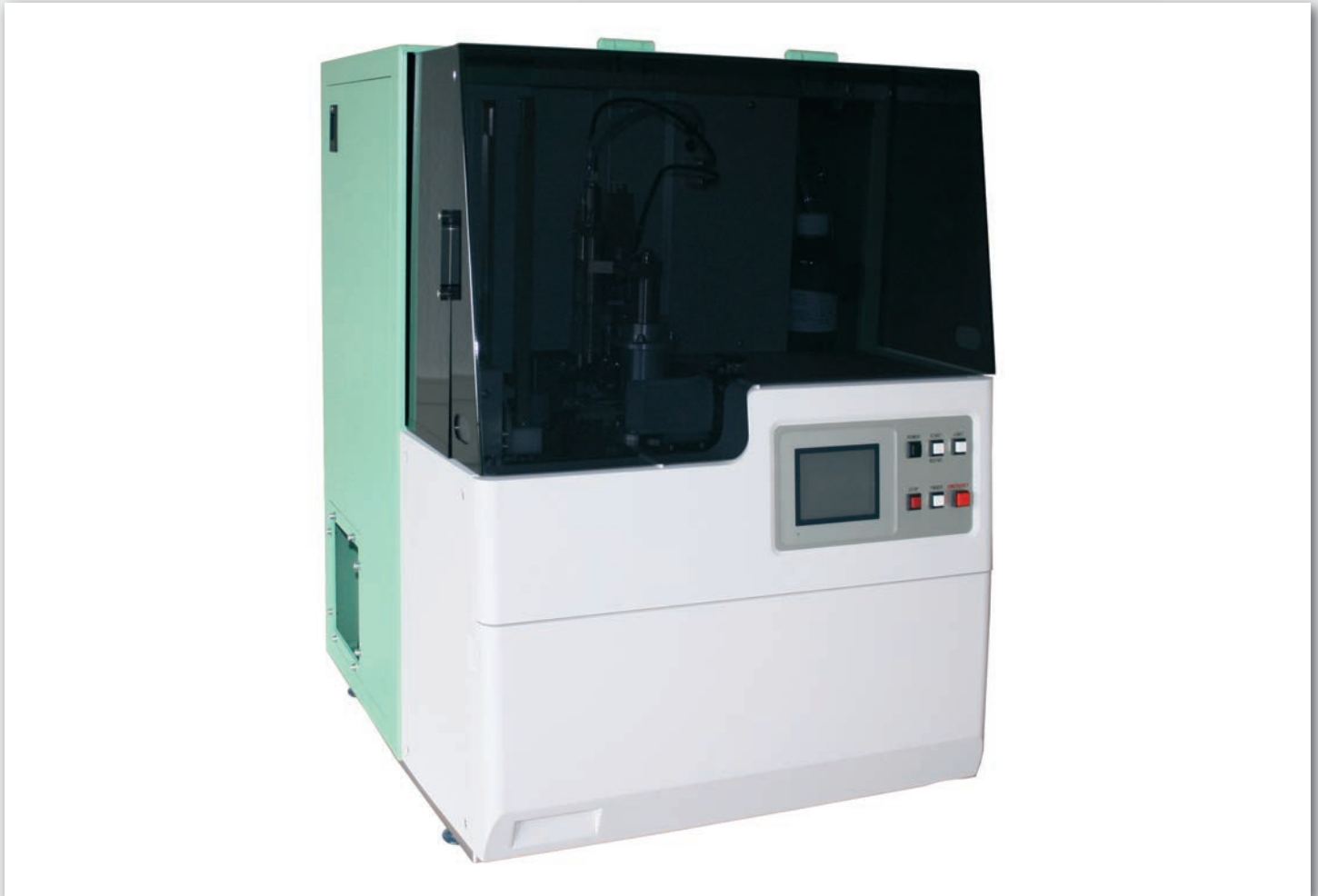

- Eindeckgeschwindigkeit bis zu 300 Objektträger pro Stunde
- Bedienung über Touch Screen
- kompatibel mit allen handelsüblichen Objektträgern und Eindeckmedien

# Objektträger-Glas-Eindeckautomat

## RCM 9000

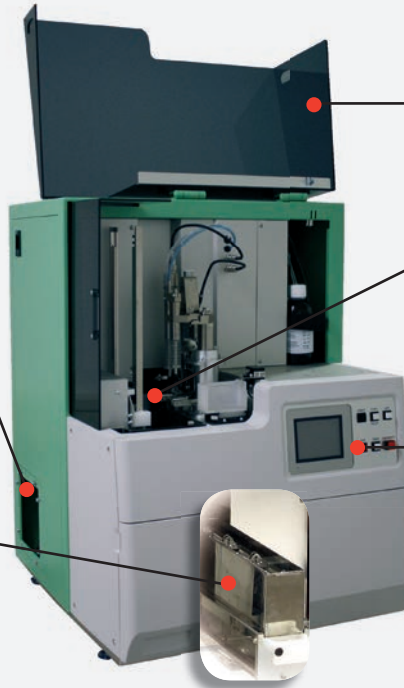

### Abluftanschluß

Die integrierte Absaugung der Lösungsmitteldämpfe dient dem Gesundheitsschutz des Anwenders. Alternativ zum Anschluss an ein Abluftsystem ist auch ein Aktivkohlefilter erhältlich.

### Behälter für Objektträgerhalter

Die Objektträgerhalter aus dem Färbeautomaten werden direkt in den Behälter gestellt. Pro Durchgang können bis zu 60 Objektträger bearbeitet werden.

### Haube

Verhindert das Austreten von Xyoldämpfen und das Eintreten von Staub während des Eindeckens.

### Dispenser

Nach dem Eindecken wird der Dispenser automatisch in das Lösungsmittelreservoir (z.B. Xylol) zurückgeführt. Das verhindert das Eintrocknen von Eindeckmitteln in der Nadelspitze.

### Bedienfeld

An dem Bedienfeld mit Display kann der Anwender jederzeit den Systemstatus ablesen, prüfen oder verändern.

Der **RCM 9000** ist die neueste Evolutionsstufe der RCM-Familie. Er verbindet alle Vorteile vorheriger Modelle und ist dabei für die Benutzerfreundlichkeit optimiert. Neben der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit können Nutzer bereits abgearbeitete Objektträger im noch laufenden Prozess entnehmen. Der farbige Touch-Bildschirm erleichtert die Einstellung des Gerätes.

Die innovative Technik des Glas-Eindeckautomaten **RCM 9000** gewährleistet ein optimales Ergebnis bei gleichbleibend hoher Qualität. Histologische und zytologische Präparate werden schnell, sauber und zuverlässig eingedeckt. Mit einer Eindeckgeschwindigkeit von bis zu 400 Objektträgern pro Stunde zeichnet sich der **RCM 9000** durch hohen Durchsatz und Flexibilität aus. Das Gerät arbeitet problemlos mit allen handelsüblichen Deckgläsern, Objektträgern und Eindeckmitteln. Objektträgerhalter aller gängigen Routinefärbeautomaten können im **RCM 9000** verwendet werden. Durch die integrierte Absaugung der Lösungsmitteldämpfe ist die Sicherheit des Laborpersonals jederzeit gewährleistet.

### Technische Daten:

Eindeckzeit: 12 bis 20 Sek. pro Objektträger, regelbare 7-Stufen-Geschwindigkeit  
 Eindeckmittelmenge: 0,04 bis 0,2 m<sup>3</sup>, einstellbar  
 Eindeckmittelbehälter: handelsübl. Eindeckmittelbehälter od. unser Standardbehälter

### Objektträger:

Größe: 26 x 76 mm  
 Stärke: 0,9 bis 1,2 mm  
 Kapazität: 60 Stück  
 Gewicht: 57 kg  
 Anschlusswerte: 110-230V / 50/60Hz / 460VA  
 Maße gesamt (L/T/H): 500 x 540 x 640 mm

### Deckgläser:

Maße - Standard: 24 x 40, 50, 55, 60 mm  
 Maße - optional: 24 x 32, 36 mm  
 25 x 40, 50, 55, 60 mm  
 Stärke: 0,12 bis 0,17 mm  
 Kapazität: 200 Stück

Art.-Nr. 45-9000-00



### Medite GmbH

Wollenweberstr. 12  
 31303 Burgdorf/Germany  
 Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0  
 Fax +49 (0) 51 36/88 84-55  
 info@medite.de  
 www.medite.de

Änderungen vorbehalten. Bilder und Farben können abweichen.

**MEDITE**   
 Medite Service AG  
 Binzstrasse 5 044 744 30 20  
 8953 Dietikon mediteservice.ch