

Twister®

Folieneindeckautomat



- Einfache Bedienung durch Farb-Touch-Bildschirm
- Bis zu 1.200 Präparate pro Stunde
- Arbeitet mit 20er- und 30er-Objektträger-Haltern
- Mit integriertem Aktivkohlefilter
- Zuverlässige Arbeitsweise

Mit dem Folieneindeckautomat **Twister®** hat **MEDITE** ein Gerät entwickelt, welches durch Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Optik besticht. Die Flügeltüren ermöglichen einen optimalen Zugriff, z. B. für das Auswechseln der Eindeckfolie, schützen aber ansonsten vor Umwelteinflüssen.

Die einfache und schnelle Einstellung der Parameter (z. B. Folienlänge) wird über einen übersichtlichen Farb-Touch-Bildschirm vorgenommen.

Der **Twister®** ermöglicht die Verwendung von Objektträgerhaltern mit 20er- und 30er-Kapazität. Insgesamt können bis zu 1.200 Präparate pro Stunde eingedeckt werden. Leere und mit fertigen Objektträgern vollständig beladene Objektträgerhalter werden automatisch erkannt und in die Ausgabeschächte geleitet.


Über eine Einstellschraube lässt sich individuell die benötigte Xylolmenge auch bei laufendem Gerät regulieren. Außerdem sorgt eine Abfallflasche dafür, dass überschüssiges Xylol sicher aufgefangen und entsorgt werden kann.

Der **Twister®** hat einen integrierten Aktivkohlefilter zur Filterung von Lösungsmitteldämpfen. Alternativ kann der Twister® an vorhandene Abzugssysteme angeschlossen werden.

Optimal abgestimmtes Verbrauchsmaterial:

Zur Verwendung im **Twister®** bieten wir Ihnen die passenden Verbrauchsmaterialien an. Alles was Sie benötigen, vom Objektträger zum Eindeckmittel bis zur Eindeckfolie **CytoTape®**, bieten wir Ihnen alles aus einer Hand.

Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

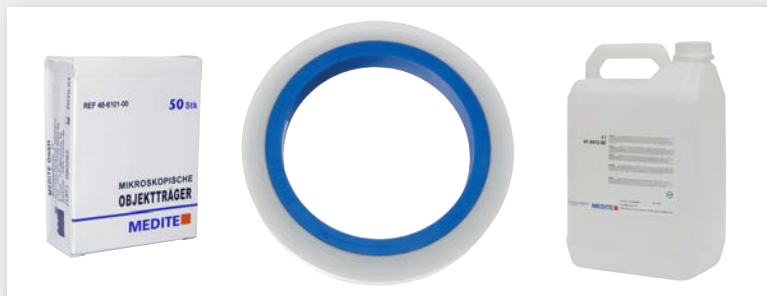

Technische Daten:

Art.-Nr. 03-5000-00

Objektträger-Halter-Kapazität:	20 oder 30 Stück
Eindeckdauer:	ca. 3 Sekunden
Maße (L/T/H):	730 x 310 x 545 mm
Gewicht:	65,5 kg
Anschlusswerte:	100 - 240 V

MEDITE 
Cancer Diagnostics

MEDITE GmbH

Wollenweberstr. 12
31303 Burgdorf
Germany

Tel. +49 (0) 51 36/88 84-0
Fax +49 (0) 51 36/88 84-55
info@medite.de
www.medite.de

Änderungen vorbehalten. Bilder und Farben können abweichen.